

SETTAGGIO/SETTING/REGLAGE/EINSTELLUNG/CONFIGURACIÓN

IT Recarsi sul sito <https://farò.it/it/prodotti/illuminazione-led-e-alogena/b75/>, accedere alla sezione download e selezionare la voce «Download Software», lanciare l'eseguibile


EN Go to the site <https://faro.it/en/products/illumination-led-and-halogen/b75/>, access the download section and select the option «Download Software», run the executable

FR Aller sur le site <https://faro.it/fr/produits/eclairage-led-et-halogene/b75/> accéder à la section de téléchargement et sélectionner la mention «Download Software», exécuter l'exécutable

DE Gehen Sie auf die Website <https://faro.it/de/produkte/halogen-led-beleuchtung/b75/>

In den Download-Bereich und wählen Sie «Download Software », Die ausführbare Datei ausführen

ES Dirigirse al sitio <https://faro.it/es/productos/iluminacion-led-y-halogena/b75/>, acceder a la sección de descargas y seleccionar «Download Software», Ejecutar el archivo ejecutable

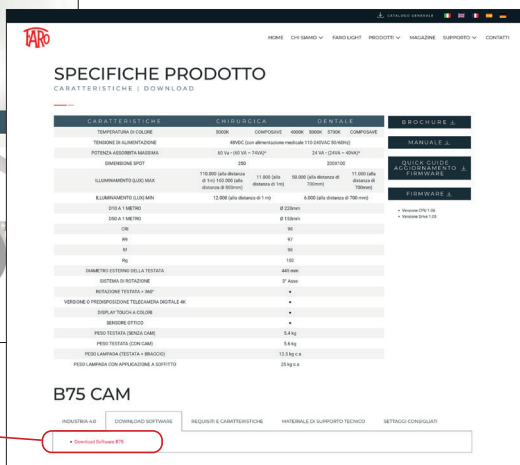


(A)

- 1. IT** Installare l'icona del programma sul desktop
EN Install the program icon on your desktop
FR Installer l'icône du programme sur le bureau
DE Installieren Sie das Programmsymbol auf Ihrem Desktop
ES Instalar el icono del programa en el escritorio
- 2. IT** Collegare i cavi USB della lampada e del pedale al PC
EN Connect the USB cables of the lamps and the pedal to the PC
FR Brancher les câbles USB de la lampe et de la pédale à l'ordinateur
DE Verbinden Sie die USB-Kabel der Lampe und der Fußsteuerung mit dem PC
ES Conectar los cables USB de las lámparas y del pedal al PC



UTILIZZO DEL SOFTWARE/USING THE SOFTWARE/UTILISATION DU LOGICIEL/VERWENDUNG DER SOFTWARE/USO DEL SOFTWARE

- IT** Selezione delle lingua. Dal menù principale **File (D)** selezionare il sottomenù **Impostazioni (E)** e scegliere la lingua
EN Selecting the language. From the main menu **File (D)** select the submenu **Setting (E)** and select the language
FR Sélection de la langue. Dans le menu principal **Fichier (D)**, sélectionner le sous-menu **Paramètres (E)** et choisir la langue
DE Sprachauswahl. Im Hauptmenü **Datei (D)** das Untermenü **Einstellungen (E)** auswählen und die Sprache wählen
ES Selección del idioma. Desde el menú principal **Archivo (D)**, seleccionar el submenú **Configuración (E)** y seleccionar el idioma

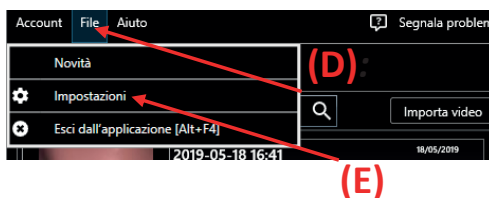

- IT** Acquisizione foto: premere il pedalino/mouse per 1 secondo
EN Photo acquisition: press the pedal/mouse for 1 second
FR Acquisition de photo: appuyer sur la pédale/souris pendant 1 seconde
DE Fotoaufnahme: das Pedal/die Maus für 1 Sekunde drücken
ES Captura de fotos: pulsar el pedal/ratón durante 1 segundo
- IT** Acquisizione video: per avviare e interrompere l'acquisizione premere per 2 secondi il pedalino
EN Video acquisition : to start and stop acquisition, press the pedal for 2 seconds
FR Acquisition vidéo: pour lancer et arrêter l'acquisition, appuyer sur la pédale pendant 2 secondes
DE Videoaufnahme: um die Aufnahme zu starten oder zu unterbrechen das Pedal für 2 Sekunden drücken
ES Captura de video: para iniciar y detener la captura, pulsar el pedal durante 2 segundos

- IT** Impostazioni videocamera. Accedendo al menù impostazioni è possibile regolare:

- Risoluzione del video in HD Full HD e 4k (A)
- Bilanciamento del bianco (B)
- Zoom digitale (C)
- Microfono (D)

EN Video camera settings. Accessing the Settings menu, you can adjust:

- Video resolution from HD to Full HD and 4K (A)
- White balancing (B)
- Digital zoom (C)
- Microphone (D)

FR Paramètres caméra vidéo

Le menu Paramètres permet de régler les éléments suivants:

- Résolution de la vidéo de HD à Full HD at 4K (A)
- Equilibrage du blanc (B)
- Zoom numérique (C)
- Microphone (D)

DE Kameraeinstellung


Im Menü Einstellungen kann folgendes eingestellt werden:

- Videoauflösung von HD auf FullHD und 4K (A)
- Weißabgleich (B)
- Digitaler Zoom (C)
- Mikrofon (D)

ES Configuración de la videocámara

Al acceder al menú Configuración puede regularse:

- Resolución del video de HD a Full HD y 4K (A)
- Balance de blancos (B)
- Zoom digital (C)
- Micrófono (D)

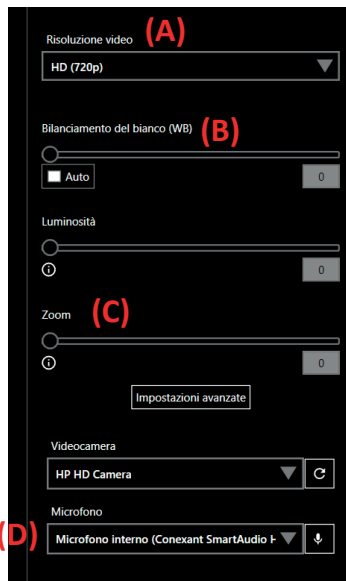

**SETTAGGI / CONSIGLIATI / RECOMMENDED CAMERA SETTINGS / CONFIGURATION
RECOMMANDEE DE LA CAMERA / CONFIGURACIÓN DE CÁMARA RECOMENDADA /
EMPFOHLENE KAMERA EINSTELLUNG**

IT

Proprietà

Video Proc Amp Regolazione fotocamera

Zoom 0 ☐ Auto

Messa a fuoco 220 ☒

Esposizione -8 ☐

Apertura (Diaframma) ☐

Panoramica ☐

Inclinazione ☐

Rotazione ☐

Compensazione scarsa luminosità ☐

Predefinite

OK Annulla Applica

Proprietà

Video Proc Amp Regolazione fotocamera

Luminosità 15 ☐ auto

Contrasto 0 ☐

Tonalità 0 ☐

Saturazione 50 ☐

Nitidezza 2 ☐

Gamma 107 ☐

Bilanciamento del bianco 3147 ☐

Controluce 0 ☐

Guadagno ☐

Attiva colore ☐ Frequenza rete elettrica (Antisfarfallio) 50 Hz ☐

Predefinite

OK Annulla Applica

EN

Properties

Video Proc Amp Camera Control

Zoom 0 ☐ Auto

Focus 220 ☒

Exposure -8 ☐

Aperture (Iris) ☐

Pan ☐

Tilt ☐

Roll ☐

Low Light Compensation ☐

Default

OK Cancel Apply

Properties

Video Proc Amp Camera Control

Brightness 15 ☐ Auto

Contrast 0 ☐

Hue 0 ☐

Saturation 50 ☐

Sharpness 2 ☐

Gamma 107 ☐

White Balance 3147 ☐

Backlight Comp Gain ☐

ColorEnable ☐ PowerLine Frequency (Anti Flicker) 50 Hz ☐

Default

OK Cancel Apply

FR

Propriétés

Amp proc vidéo Contrôle de la caméra

Zoom 0 ☐ Automatique

Concentration 200 ☒

Exposition -8 ☐

Ouverture (Iris) ☐

Panoramique ☐

Inclinaison ☐

Pellicule ☐

Compensation luminosité faible ☐

Par défaut

OK Annuler Appliquer

Propriétés

Amp proc vidéo Contrôle de la caméra

Luminosité 16 ☐ Automatique

Contraste 0 ☐

Tinte 0 ☐

Saturation 50 ☐

Netteté 2 ☐

Correction gamma 107 ☐

Balance des blancs 3147 ☐

Compensation contre-jour Gain ☐

Activer les couleurs ☐ Fréquence du courant (anti scintillement) 50 Hz ☐

Par défaut

OK Annuler Appliquer



ES

Propiedades

Amplificador procesador de vídeo Control de la cámara

Zoom 0 ☐ Auto

Eoco 220 ☐

Exposición -8 ☐

Abertura (diafragma)

Panorámica

Inclinación

Rotación

Compensación de poca luz ☐

Predeterminado

Aceptar Cancelar Aplicar

Propiedades

Amplificador procesador de vídeo Control de la cámara

Brillo 15 ☐ Auto

Contraste 0 ☐

Matiz 0 ☐

Saturación 50 ☐

Nitidez 2 ☐

Gamma 107 ☐

Balance de blanco 3147 ☐

Comp. de luz de fondo 0 ☐

Gainada

Habilitar color ☐ Frecuencia de PowerLine (antiparapadeo) 50 Hz ☐

Predeterminado

Aceptar Cancelar Aplicar

DE

Eigenschaften

Video-Proc-Verstärker Kamerasteuerung

Zoom 0 ☐ Autom.

Fokuss 200 ☒

Belichtung -8 ☐

Öffnungsgrad (Iris)

Schwenkung

Neigung

Rollen

Kompensierung bei wenig Licht ☐

Standard

OK Abbrechen Übernehmen

Eigenschaften

Video-Proc-Verstärker Kamerasteuerung

Helligkeit 15 ☐ Autom.

Kontrast 0 ☐

Farbton 0 ☐

Sättigung 50 ☐

Schärfe 2 ☐

Gamma 107 ☐

Weißabgleich 3147 ☐

Hintergrund 0 ☐

Verstärkung

Farbaktivierung ☐ Leitungsfrequenz (gegen Flackern) 50 Hz ☐

Standard

OK Abbrechen Übernehmen